



Kundeninformation Katheterbeutelwechsel

Wichtiger Hinweis: Grundsätzlich soll das geschlossene System möglichst lange erhalten bleiben, um eine bakterielle Verunreinigung zu vermeiden. Das Kürzen der Beinbeutelschläuche ist nicht immer zulässig, außer Sie verwenden sterile Adapter, sterile Handschuhe und eine sterile Schere! Bei der Versorgung von Nierenbeckenkathetern ist besondere Sorgfalt geboten, um Infektionen zu vermeiden. Sofern Sie aber trotz dieses Hinweises die Schläuche kürzen und die Beutel in einem kürzeren Intervall, je nach Urinbeschaffenheit bzw. Verschmutzung wechseln wollen, dann beachten Sie bitte folgende Vorgehensweisen, wobei wir ausdrücklich keine Gewähr für die Entstehung möglicher Infektionen geben können.

Tägliches Vorgehen:

Morgens:

1. Den Auslass des Beinbeutels verschließen (Bild 6)
2. Den Bettbeutel vom Beinbeutel lösen, in die Toilette entleeren
3. Den Bettbeutel zum Trocknen aufhängen

Abends:

1. Den Bettbeutel am Auslass des Beinbeutels anschließen und den Auslass öffnen
2. Den Beinbeutel vom Bein lösen und neben das Bein in das Bett legen
3. Den Bettbeutel am Bettrahmen senkrecht aufhängen (Bild 7)

Anbringen des Bettbeutels am Beinbeutel

(Der Wechsel des Bettbeutels erfolgt individuell nach Absprache!)




Der Bettbeutel mit Ablauf





Beinbeutel für den Austausch (alle 1- 3 Tage) vorbereiten: (Der Wechsel des Bettbeutels erfolgt individuell nach Absprache!)

1. Klettbänder in die dafür vorgesehenen Öffnungen einfädeln (Bilder 1 - 3)
2. Klettbänder an das Bein anlegen und oben und unten auf die passende Länge zuschneiden (Bilder 4 – 5)
3. Den Schlauch des Beinbeutels auf die passende Länge kürzen und an den Katheter anschließen (Bild 6 – 9)

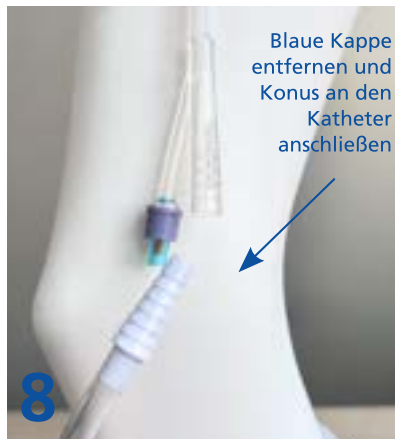

Verbandwechsel Bauchdeckenkatheter (sofern medizinisch indiziert) alle 1-2 Tage:

1. Pflaster entfernen
2. Desinfektionsmittel aufsprühen
3. Einmal um den Katheter mit einer sterilen Kompresse herum und dann nach außen wegwischen
4. Desinfektionsmittel nochmals aufsprühen und 1 Minute einwirken lassen
5. Neues Pflaster aufkleben



Weitere Infos finden Sie hier. Einfach den QR Code scannen.